



ilustrační obrázek
lehátko GE2 s podhlavníkem 46 cm

Účel použití

Rehabilitační, vyšetřovací (masážní) lehátko je určeno na klinické i fyzikální vyšetření pacientů v ambulancích, ordinacích praktických i odborných lékařů.

Může být doplněno o područky, které umožňují zavedení žilního vstupu.

V rehabilitačních zařízeních slouží k provádění fyzioterapie.

Je určeno pro pacienty nemocnic, léčeben, odborných léčebných ústavů, lázní, domovů pro seniory, maséren, wellnessů a dalších zařízení za nepřetržitého dohledu zdravotnického personálu.

Lehátko je vhodné i do místností 1. pomoci.

Lehátko lze použít i při drobných chirurgických zákrocích bez narkózy, kdy je pacient při plném vědomí.

Jedná se o zdravotnický prostředek (ZP) třídy I nesterilní, neměřící.

Určení pacienta u lehátka GE2

- a) pro dospělé pacienty s hmotností ≥ 40 kg, s výškou ≥ 146 cm, s BMI ≥ 17 a jejichž hmotnost nepřekročí bezpečné provozní zatížení
- b) pro dětské pacienty s výškou od 75 cm do 155 cm, hmotností rovnou nebo menší 70 kg, ale pouze za podmínky trvalého dohledu pověřeného a zaškoleného pracovníka!

Lehátko GE2 může být používáno dětskými pacienty **pouze při dodržení následující podmínky.**

Při použití lehátka GE2 s dlouhým (64 cm) podhlavníkem dětským pacientem musí být podhlavník vždy ve vodorovné poloze, nepřizvednutý a pacient musí být pod dozorem odpovědné proškolené osoby.

Popis lehátka ve standardním provedení

- Pevná kovová konstrukce
- Dvoudílná ložná plocha
- Výškově stavitelné elektropohonem
- Bez otvoru pro obličej
- Ruční ovladač pro umístění na horní rám nebo nožní ovladač pro položení na podlahu
- Bezpečnostní krabice – vyjmutím kolíčku odpojí napájení elektropohonu a zamezí spuštění lehátka neoprávněnou osobou
- Bezpečnostní spojka elektropohonu – ochrana před skřípnutím konstrukcí lehátka
- Omyvatelná, otěru odolná a dezinfikovatelná koženka
- Výběr barvy konstrukce a koženky dle vzorníku

Technické parametry

Rozměr ložné plochy	68x195 cm (standardní), 76x195 cm (rozšířená) <i>při změně výšky je třeba počítat s rezervou cca 20 cm (lehátko při ohybu nabíhá do délky)</i>
Výška	46 až 91 cm <i>plynule nastavitelná v celém rozsahu</i>
Nastavení výšky	elektropohonem
Délka podhlavníku	46 cm nebo 64 cm
Naklopení podhlavníku	-42° až + 30° (podhlavník s délkou 46 cm) 0° až + 60° (podhlavník s délkou 64 cm) <i>plynulé nastavení v celém rozsahu nadlehčení pomocí plynové pružiny</i>
Výška čalounění	4 cm (2 cm tužší pěna a 2 cm měkká PUR pěna)
Hmotnost	65 kg (v základním provedení)
Maximální hmotnost pacienta	170 kg
Max. celkové zatížení lehátka	174 kg

Lehátko GE2 je zařazeno do skupiny 1 a podle zamýšleného použití do třídy B.

Nesmí být používáno v blízkosti aktivních VF chirurgických přístrojů a v RF stíněné místnosti zdravotnických systémů pro zobrazování magnetickou rezonancí, kde je vysoká intenzita EM rušení.

Bezpečnostně technická kontrola (BTK) se provádí po 2 letech.

Provozovatel lehátka odpovídá za včasné objednání BTK u výrobce lehátka.


Volitelné parametry lehátka

Provedení podhlavníku	Jednodílný v délce 46 cm	S otvorem pro obličej včetně krytky Bez otvoru pro obličej
	Jednodílný v délce 64 cm	S otvorem pro obličej včetně krytky Bez otvoru pro obličej
Šířka ložné plochy	68 cm (standardní) 76 cm (rozšířená)	
Pojezdová kolečka	Bez koleček Centrálně ovládaná pojezdová kolečka <i>(nelze dodatečně dokoupit)</i>	
Ovládání	Ruční ovladač s magnetem nebo háčkem pro připevnění na horní rám lehátka Nožní ovladač pro položení na podlahu Lištový konstrukční ovladač po obvodu lehátka <i>(nelze dodatečně dokoupit)</i>	
Područky	Bez područek Naklápěcí područky <i>(nelze dodatečně dokoupit)</i>	
Bezpečnostní zábrany	Bez zábran Sklopné zábrany na obou stranách <i>(nelze dodatečně dokoupit)</i>	


Volitelné příslušenství

Držák role hygienické podložky	Držák na roli hygienické podložky umístěný pod podhlavníkem Držák na roli hygienické podložky umístěný u noh <i>(nelze dodatečně dokoupit)</i>
--------------------------------	---

Vzorník barev konstrukce

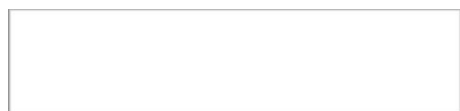

RAL 9003 jasně bílá



RAL 1015 slonová kost



RAL 5012 světle modrá



RAL 5014 holubí modrá



RAL 7035 světle šedá



RAL 6019 pastelová zelená

Vzorník koženek


Koženky ze základní řady (řada 20)



20TN36 béžová



20TN58 meruňková

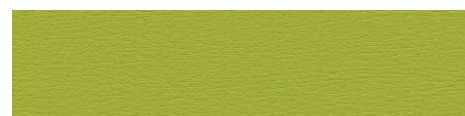

20TN43 limetková



20TN09 ledově modrá




20TN53 atol




20TN05 chrom

Koženky z řady Plus (řada 30)

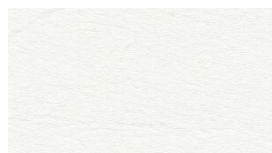

30TN98
bílá

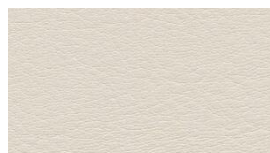

30TN10
krémová




30TN30
písková




30TN57
kukuřicová



30TN07
mango

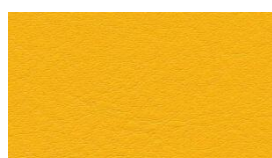

30TN42
šafrán

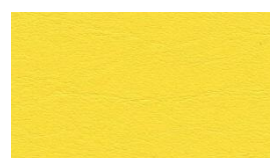

30TN343
limonáda



30TN556
oranžová



30TN557
karneol



30TN54
ohnivá



Základní vlastnosti koženek



dlouhá životnost



odolná proti roztržení



snadná údržba



otěruvzdorná
DIN EN ISO 5470-2
> 100 000 Martindale



světlostálá



odolná dezinfekčním prostředkům



splňuje normy pro použití ve
zdravotnictví
DIN EN ISO 10993-5+10



odolná krvi a moči



bez ftalátů



veganské složení

Lehátko GE2

- ✓ s podhlavníkem o délce 64 cm
- ✓ bez otvoru pro obličej
- ✓ s nožním ovladačem zdvihu



Lehátko GE2

- ✓ s podhlavníkem o délce 46 cm
- ✓ s otvorem pro obličej včetně krytky
- ✓ s držákem role pod podhlavníkem