



Transportní lehátko GP2
ilustrační obrázek

Účel použití

Transportní lehátko GP2 je vhodné pro transport pacientů zaškolenou obsluhou uvnitř budovy po rovných a dostatečně pevných podlahách.

Lze ho například použít při převážení pacientů z lůžka na vyšetření rentgenem, k zákrokům prováděným na operačních stolech, k fyzikálnímu, klinickému vyšetření pacientů při plném vědomí a v analgosedaci, k provádění menších chirurgických zákroků a endoskopických výkonů a pro ambulance I. pomoci.

U pacientů v analgosedaci je možno transportní lehátko použít k výše uvedeným výkonům pod podmínkou zvednutých postranic a trvalého dohledu odborného personálu.

Jedná se o zdravotnický prostředek (ZP) třídy I nesterilní, neměřicí.

Určení pacienta u transportního lehátka GP2

pro dospělé pacienty s hmotností ≥ 40 kg, s výškou ≥ 146 cm, s BMI ≥ 17 a jejichž hmotnost nepřekročí bezpečné provozní zatížení.

Popis lehátka ve standardním provedení

- Pevná kovová konstrukce
- Dvoudílná ložná plocha
- Bez otvoru pro obličej
- Výškově stavitelné hydraulickým pohonem
- Ovládací páky hydraulického pohonu na obou stranách lehátka
- Nerezová madla v čele i nohách lehátka pro snazší manipulaci
- Nerezové boční zábrany sklopné do boku
- Nerezové medi lišty po obvodu lehátka (eurolišta 25x10 mm)
- Otočné nárazníky v rozích lehátka
- Otvory pro infuzní stojan o průměru 13 mm
- Omyvatelná, otěru odolná a dezinfikovatelná koženka
- Výběr barvy konstrukce a koženky dle vzorníku

Technické parametry

Rozměr ložné plochy	66x195 cm <i>při změně výšky je třeba počítat s rezervou cca 20 cm (lehátko nabíhá do délky)</i>
Vnější rozměry lehátka	75x205 cm
Výška	49 až 94 cm <i>plynule nastavitelná v celém rozsahu</i>
Nastavení výšky	hydraulickým pohonem
Délka podhlavníku	64 cm
Naklopení podhlavníku	0° až + 60° <i>plynulé nastavení v celém rozsahu, nadlehčení pomocí plynové pružiny</i>
Výška čalounění	4 cm (2 cm tužší pěna a 2 cm měkká PUR pěna)
Kolečka	průměr 150 mm, ovládaná centrálně
Hmotnost	80 kg
Maximální hmotnost pacienta	170 kg
Max. celkové zatížení lehátka	174 kg

Bezpečnostně technická kontrola (BTK) se provádí po 2 letech.

Provozovatel lehátka odpovídá za včasné objednání BTK u výrobce lehátka.

Volitelné parametry lehátka

Pojezdová kolečka	standardní s jedním antistatickým kolečkem
Ložná plocha	standardní s pevným nožním dílem s naklopitelným nožním dílem v rozmezí 0° až +10° (4 polohy)

Volitelné příslušenství

Držák role hygienické podložky	na roli o šíři 50 cm umístěný pod podhlavníkem na roli o šíři 60 cm umístěný u noh (<i>nelze dodatečně dokoupit</i>) <i>- nelze kombinovat s odkládacím košíkem</i>
Infuzní stojan	neruzový výsuvný stojan pro zavěšení 2 infuzních sáčků
Zajišťovací pásy	stavitelné pásy pro neklidné pacienty
Odkládací košík	vyjímatelný plastový košík u noh pro odložení věcí <i>šířka 35 cm, hloubka 25 cm, výška 20 cm, barva dle nabídky</i>



neruzový infuzní stojan




naklopitelný nožní díl




vyjímatelný odkládací košík

Vzorník barev konstrukce

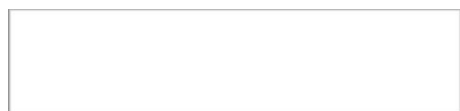

RAL 9003 jasně bílá



RAL 1015 slonová kost



RAL 5012 světle modrá



RAL 5014 holubí modrá



RAL 7035 světle šedá



RAL 6019 pastelová zelená

Vzorník koženek


Koženky ze základní řady (řada 20)



20TN36 béžová



20TN58 meruňková

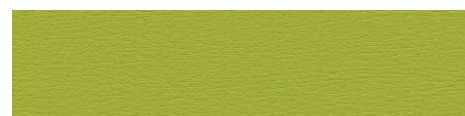

20TN43 limetková



20TN09 ledově modrá




20TN53 atol




20TN05 chrom

Koženky z řady Plus (řada 30)

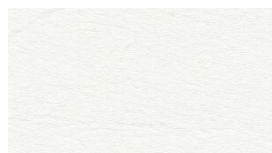

30TN98
bílá

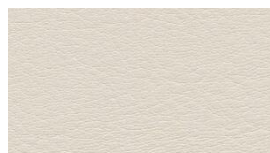

30TN10
krémová




30TN30
písková




30TN57
kukuřicová



30TN07
mango

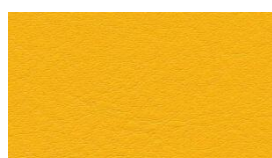

30TN42
šafrán

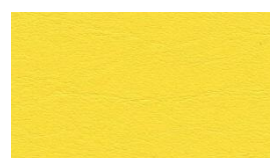

30TN343
limonáda



30TN556
oranžová



30TN557
karneol



30TN54
ohnivá



Základní vlastnosti koženek



dlouhá životnost



odolná proti roztržení



snadná údržba



otěruvzdorná
DIN EN ISO 5470-2
> 100 000 Martindale



světlostálá



odolná dezinfekčním prostředkům



splňuje normy pro použití ve
zdravotnictví
DIN EN ISO 10993-5+10



odolná krvi a moči



bez ftalátů



veganské složení