

Zátěžové sáčky bez kroužku

Jedná se o zdravotnický prostředek



ilustrační obrázek

Popis

Zátěžové sáčky bez kroužku jsou určeny k zatížení elektrod na pacientově těle pro lepší snímání impulsů, dále pak k zakládání končetin proti bočnímu posunutí.

Pro ortopedickou kliniku lze použít sáčky pro zakládání končetin.

Jde o zdravotnický prostředek určený především do zdravotnických zařízení.

Bezpečnostní pokyny

Sáčky především s vyšší zátěží 2-3 kg mohou při dlouhodobém zatížení například elektrod na těle pacienta vytvořit otisky na těle a omezit průtok krve.

Proto je nutné používat zátěžové sáčky na určenou dobu za dohledu odborného zaškoleného personálu.

Varianty

Zátěžový sáček bez kroužku 0,25 kg

Zátěžový sáček bez kroužku 0,50 kg

Zátěžový sáček bez kroužku 1,00 kg

Zátěžový sáček bez kroužku 2,00 kg

Zátěžový sáček bez kroužku 3,00 kg

tolerance hmotnosti ± 5 %

Zátěžové sáčky se standardně vyrábí v rozměru 20 cm x 30 cm.

Lze je vyrobit i v rozměru 10 cm x 30 cm, takový rozměr je vhodný například pro ortopedickou kliniku k zakládání končetin.

Bezpečnostně technická kontrola

Bezpečnostně technická kontrola se provádí 1x za 10 let na základě vaší objednávky.




ROUSEK s. r. o.

Zborovská 435 - sídlo firmy a fakturační adresa
Nádražní 219 - kanceláře, výroba a expedice
549 01 Nové Město nad Metují



www.rousek.eu
rousek@rousek.eu
+420 491 470 767

Vzorník koženek

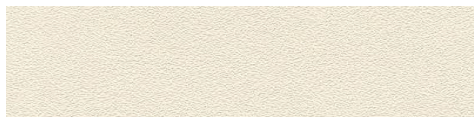

20P47 světle béžová



20P54 limetková



30TV09 modrá



splňuje lékařský standard
fulfills medical standard
erfüllt Medizinproduktegesetz
DIN EN ISO 10993-5+10



antibakteriální, antimikrobiální
antibacterial, antimicrobial
antibakteriell, antimikrobiell



odolná olejům a tukům
resistant to oil and fat
öl- und fettbeständig



odolná proti oděru
abrasion resistant
abriebfest
**DIN EN ISO 5470-2:
> 300 000 Martindale**



odolná proti roztržení
tear resistant
reißfest



odolná dezinfekčním prostředkům
disinfectant resistant
desinfektionsmittelbeständig



odolná proti potu, krvi a moči
resistant to sudor, blood and urine
schweiß, urin und blut beständig



snadno se čistí
easy to clean
pflegeleicht



Stálobarevná
lightfast
lichtecht



dlouhá životnost
long-lasting
langlebig



veganské složení
vegan
vegan



snížená hořlavost
flame protection
schwer entflammbar
**NF M2, BS 5852 IS-0+1,
DIN 4102 (Part 1, B2),
DIN EN 1021 1+2,
MVSS 302**

V naší nabídce najdete i zátěžové sáčky s kroužkem vhodné jako zátěž při trakcích



Doporučené dezinfekční prostředky

K dezinfekci koženky NEPOUŽÍVEJTE prostředek Incidin liquid od firmy Ecolab GmbH, prostředek Guasan a prostředky obsahující bělidlo. Tyto přípravky mohou koženku poškodit.

V následující tabulce jsou vypsány prostředky vhodné pro dezinfekci koženek:

Název prostředku	Typ prostředku	Výrobce
Cleanisept / Wipes	dezinfekční ubrousky	Dr. Schumacher GmbH
Descosept PUR Wipes RTU		
Descosept Sensitive Wipes		
Descosept spezial Wipes		
Optisept	koncentrovaný roztok	
Ultrasol active		
Biguanid Fläche NR		
Kohrsolin FF	koncentrovaný roztok	Bode Chemie GmbH
Bacillol® 30 Sensitive	dezinfekční pěna	
Dismozon plus	dezinfekční granulát	
Terralin protect	koncentrovaný roztok	Schülke & Mayr GmbH
Mikrozid universal liquid	dezinfekční roztok	
Incidin OxyWipe S	dezinfekční ubrousky	Ecolab GmbH
Incidin Pro	koncentrovaný roztok	
Incidin Plus		
Incidin Active	pevný koncentrát	
Meliseptol foam pure	dezinfekční pěna	B. Braun Melsungen AG
Meliseptol rapid	dezinfekční sprej	
FD300	koncentrovaný roztok	Dürr Dental AG
FD366	dezinfekční roztok	
Biguacid S	koncentrovaný roztok	Antiseptica Dr. H.-J. Molitor GmbH
Descogen Liquid r.f.u.	dezinfekční roztok	
Lysoformin spezial	koncentrovaný roztok	Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Aldasan 2000		
Apesin rapid	koncentrovaný roztok	Tana Chemie GmbH
Aquama® Indigo®	dezinfekční roztok	Aquagenius Schweiz GmbH
CosiMed Konzentrat	koncentrovaný roztok	CosiMed GmbH